

Evetric® Bond

Αυτο-αδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας προηγμένης τεχνολογίας

Ανακαλύψτε
το μυστικό
τής εύκολης
συγκόλλησης



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Evetric® Bond

Αυτο-αδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας προηγμένης τεχνολογίας

Ένα φιαλίδιο, δύο πρωτόκολλα συγκόλλησης

Ο Evetric® Bond είναι αποδοτικός και αισθητικός. Ο Evetric Bond είναι αυτο-αδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας, ενός φιαλιδίου, ο οποίος εφαρμόζεται με τριβή και ανάδευση (δυναμική τοποθέτηση), απλώνεται με αέρα και φωτοπολυμερίζεται πολύ γρήγορα. Όταν ο Evetric Bond χρησιμοποιείται ακολουθώντας πρωτόκολλο επιλεκτικής αδροποίησης επιτυγχάνονται προβλέψιμα αποτελέσματα – ένας σημαντικός παράγοντας στις αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών.

Εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού χάρη στις νανο-ενισχυτικές ουσίες

Οι νανο-ενισχυτικές ουσίες που περιέχονται στον Evetric Bond εξασφαλίζουν ομοιογενή διαβροχή των οδοντικών επιφανειών. Δημιουργείται ένα λείο και ομοιόμορφο φιλμ, το οποίο παραμένει σταθερό ακόμη και όταν ο παράγοντας απλωθεί με αέρα, διευκολύνοντας την επίτευξη ισχυρού δεσμού.

Δυνατές και αισθητικές αποκαταστάσεις σε συνδυασμό με το Evetric®


Ο Evetric Bond είναι ο ιδανικός συγκολλητικός παράγοντας για το Evetric, την νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη υψηλής τεχνολογίας, για καθολική χρήση. Μαζί, αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για την δημιουργία μακροχρόνιων αποκαταστάσεων υψηλής ποιότητας.

Πρωτόκολλο αυτο-αδροποίησης




Dr R. Watzke, R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, 2014

Πρωτόκολλο επιλεκτικής αδροποίησης

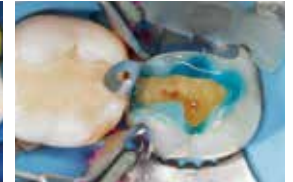

Dr S. Huth, R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, 2014

Αντοχή στην απόσχιση με πρωτόκολλο αυτο-αδροποίησης σε συνδυασμό με Evetric®

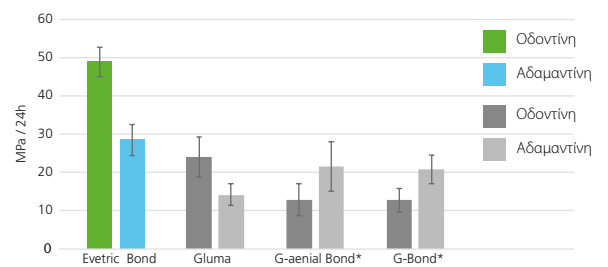

The Dental Advisor, Report Number 63, October 2014, Bond Strength of Several Bonding Agents Used with Self-Etch and Selective Enamel Etching Techniques.

*Αυτά τα σήματα δεν είναι κατατεθειμένα από την Ivoclar Vivadent AG

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Αποτελεσματικός και αισθητικός χάρη στις δύο επιλογές στον τρόπο συγκόλλησης.
- Εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού λόγω της δημιουργίας ομοιόμορφου φιλμ.
- Μακροχρόνιες, αποκαταστάσεις αντοχής για όλες τις κοιλότητες.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε

www.ivoclarvivadent.com/clip_evetric_bond



Το Evetric Bond αποτελεί μέρος της κατηγορίας «Άμεσες Αποκαταστάσεις». Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και εξασφαλίζουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασίες:

Evetric Bond Refill 1 x 6 γρ.

Evetric System Kit 4 x 3.5 γρ. / Evetric Bond

2 x 3.5 γρ. Evetric A2

2 x 3.5 γρ. Evetric A3

1 x 6 γρ. Evetric Bond

Επίσημοι διανομείς:

Ελλάδα:

Dental Vision ΕΠΕ

Μιχαλακοπούλου 125 / 115 27 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
Τσιμισκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 /
www.dentalvision.gr

SADENT ΑΕΒΕ

17ης Νοέμβρη 4 / 151 27 Μελίσια / τηλ: 210 80 49 493 /
Τετραπόλεως 4 / 115 27 Γουδή / τηλ: 210 77 77 608 /
Ν. Τέλλογλου 7 / 546 36 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 968 799 /
www.sadent.com

www.ivoclarvivadent.gr

Unicon Hellas ΕΠΕ

Τεώ 38 / 177 78 Ταύρος / Τηλ: 210 482 8020 /
www.uniconhellas.gr

Κύπρου:

dentalcon trading ltd.

Λ. Λάρνακας 57, PO Box 27245 / 1643 Λευκωσία / τηλ: 22 466 000 /
www.dentalcon.com.cy

ivoclar
vivadent
passion vision innovation